

Instrukcja
i warunki
gwarancji

patron
MULTI



1. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Detektor upadku

inicjowanie połączeń telefonicznych do 1 numeru alarmowego, możliwość regulacji czułości detektora upadku.

Przycisk SOS

fizyczny przycisk na opasce, którego wciśnięcie inicjuje połączenia telefoniczne do 3 numerów alarmowych.

Lokalizacja

opaska pracuje w trzech sieciach: GPS (dokładność 1-10m), WiFi (dokładność do 50m), LBS (lokalizacja ostatniego nadajnika do 2000m) oraz w trzech Trybach Lokalizacji: aktualizacji położenia co godzinę, co 10 minut lub na żądanie.

Książka telefoniczna

zdalne dodawanie numerów do książki telefonicznej przez opiekuna. Kontrola nad blokowaniem połączeń z niechcianych numerów.

Ustawienia powiadomień

W przypadku niskiego poziomu baterii lub wciśnięcia przycisku SOS, zdefiniowany numer SMS otrzyma alert SMS. Opłata za SMS alarmowy jest naliczana zgodnie ze standardem zwykłego SMS-a.

Powiadomienie push

poza powiadomieniami w aplikacji możliwość otrzymywania powiadomień o istotnych zdarzeniach w formie powiadomień push na telefonie opiekuna. Zezwól aplikacji na wysyłanie powiadomień push.

Powiadomienie o lekach

możliwość ustawienia do 3 powiadomień, także powiadomienia głosowe.

Znajdź urządzenie

możliwość zdalnego uruchomienia sygnału dźwiękowego w opasce tak, aby ułatwić to jej odnalezienie

Monitorowanie parametrów

zdalne pomiary: pulsu, ciśnienia, saturacji krwi, ilości przebytych kroków, jakości snu.

 **Geo-ogrodzenie**

ustawienie bezpiecznych stref o średnicy od 200m do 2000m. Po wyjściu ze strefy opiekun zostanie o tym powiadomiony.

 **Alerty niskiego poziomu naładowania baterii**


poziom zużycia baterii można obserwować zarówno z poziomu opaski jak i aplikacji. Możliwość ustawienia alertu o niskim poziomie naładowania. Czas pracy baterii do 5 dni, zależy jednak od sposobu użytkowania opaski.

 **Nasłuch**

możliwość wykonania zdalnego połączenia telefonicznego do opaski bez konieczności odebrania tego połączenia przez użytkownika.

 **Zdalne**

restartowanie urządzenia

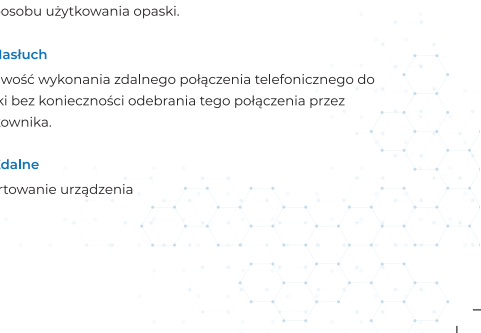

2.**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA**

- Nie moczyć produktu w płynnych chemikaliach, takich jak sódna woda lub detergent.
- Trzymaj produkt z dala od ekstremalnych środowisk, takich jak ogień, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura.
- Należy zwrócić uwagę dzieciom, aby unikały przypadkowego połknięcia produktu lub jego elementów, szczególnie małej karty SIM.
- Surowo zabrania się używania nieodpowiednich ładowarek do ładowania sprzętu, zwłaszcza ładowarek typu „quick/fast charge”.
- Funkcja lokalizowania nie działa, gdy produkt jest wyłączony i/lub znajduje się poza zasięgiem sieci.
- Należy stosować się do wytycznych dotyczących używania urządzeń bezprzewodowych. Opaska, tak jak na przykład telefon komórkowy, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu innych urządzeń.

- Produkt może zostać naprawiony wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy upewnić się, że produkt nie jest używany przez osoby nieuprawnione.
- Do prawidłowego funkcjonowania opaski niezbędne jest ściągnięcie aplikacji mobilnej Beesure GPS.
- Pamiętaj, że opaska nie jest produktem medycznym i nie może zastąpić konsultacji z lekarzem. Opaska podaje orientacyjne pomiary i nie mogą być one traktowane jako rzeczywiste wyniki badań.

3. GWARANCJA I OŚWIADCZENIA

- W przypadku demontażu lub ingerencji w obudowę produktu, produkt utraci gwarancję.
- Prosimy używać akcesoriów dostarczonych przez oryginalnego producenta, aby uniknąć nieoczekiwanych uszkodzeń.

Jeśli nie zastosujesz się do prawidłowych procedur korzystania z tego produktu lub podłączania niekompatybilnych akcesoriów, takie zachowanie automatycznie unieważni gwarancję, a nawet może zagrozić bezpieczeństwu Twojemu i innych. W związku z takim działaniem firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane przerwami w świadczeniu usług z powodu awarii sieci lub innych przyczyn siły wyższej.

• Treść niniejszej instrukcji jest zgodna ze stanem produktu w momencie produkcji. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie udziela się żadnych wyraźnych ani milczących gwarancji dotyczących dokładności, rzetelności i treści dokumentu.

• W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnych okolicznościach, firma i jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szczególne, przypadkowe lub pośrednie straty, niezależnie od przyczyny straty.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) a także zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatorów. Wspomniany symbol oznacza, że ani urządzenia ani akumulatora nie można wyrzucić wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Aby uzyskać informację o sposobie i miejscu bezpiecznego utylizowania tego typu odpadów najlepiej jest skontaktować się z lokalnymi władzami lub lokalnym punktem zbiórki odpadów.



5. WSPÓŁCZYNNIK SAR

Wielkość promieniowania emitowanego przez urządzenie zgodna z zaleceniem Rady UE. Nie większa niż 2 W/kg.

SAR		
	Body	Limit W/kg
GSM	0.840	2.0
Maksymalna moc częstotliwości radiowej		
Frequency Range	GSM 900/1800Mhz	
Transmit Power	2W/1W	

6. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma ePatron Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że opaska Patron Multi jest zgodna z dyrektywą 2014/53/UE z 16 kwietnia 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.opaskadlaseniora.pl/dokumenty

7. DANE PRODUCENTA



ePatron Sp. z o.o.
ul. Młynarska 42 lok. 115
01-171 Warszawa
Polska
opaskadlaseniora.pl
kontakt@opaskadlaseniora.pl

**Pełna treść instrukcji dostępna pod adresem
opaskadlaseniora.pl/instrukcje-obslugi**